

∴ **Dermatoscope HEINE DELTA® 20T**

Conjugué une optique de précision et la possibilité de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé



Images de haute qualité et souplesse de diagnostic

Le **Dermatoscope DELTA 20T** offre une optique de précision sans égale ainsi que la possibilité, à l'aide de la fonction «Toggle» (bascule), de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps à échanger les embouts de contact. La dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion demeure toujours possible. Il est donc possible d'adapter l'examen à chaque type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.



Le terme « qualité » est aujourd'hui l'un des termes les plus galvaudés et les plus abusivement utilisés dans le but de vendre des produits. Cependant, seules quelques entreprises sont en mesure de concrétiser la qualité de leurs produits en termes d'atouts et d'avantages pour l'utilisateur final. HEINE définit les avantages de la qualité HEINE sur le plan de la performance, de la fonction et de la durabilité :




PERFORMANCE

Optique de précision HEINE. Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes. Le système de mise au point permet d'atteindre un grossissement de 10 à 16 fois pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.

Il y a les LED. Et il y a les LED^{HQ}. HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l'intensité lumineuse et de la gestion thermique à l'indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible. **C'est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED^{HQ} (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).**



LED IN HEINE QUALITY.

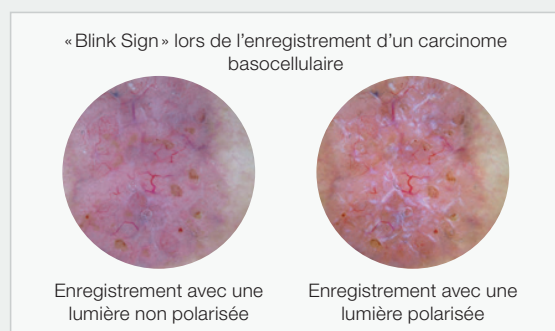

FONCTION

Fonction « Toggle » pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé. Passage confortable de la vision polarisée à la vision non polarisée par un simple appui sur un bouton. Pas besoin de changer d'embout de contact. Cette nouvelle fonction permet lors de l'observation des structures et milieux cristallins d'identifier ce que l'on nomme les « Blink Signs ».

Petit embout de contact en option. Petit embout de contact spécial pour les lésions d'accès difficile.

Possibilités d'archivage numérique. Le système de lentilles pour appareils numériques HEINE permet de raccorder sans problèmes l'instrument aux appareils reflex mono-objectif des plus grandes marques. Les lentilles spécialement adaptées réunissent l'appareil photo et l'optique du DELTA 20T et permettent ainsi une qualité d'image optimale.



DURABILITÉ

HEINE offre 5 ans de garantie. HEINE ne fait aucun compromis pour fabriquer des instruments médicaux de haute qualité. Notre engagement pour l'intégration verticale au niveau de la fabrication signifie que nous contrôlons tous les aspects de la qualité de nos instruments.

Gestion thermique des LED – les systèmes d'éclairage à LED du DELTA 20T nécessitent une gestion thermique efficace pour garantir une performance constante et la stabilité du produit. La technologie de support à LED très moderne évacue parfaitement la chaleur des LED grâce à une conception optimisée en matériaux très performants. Elle garantit ainsi une intensité lumineuse constante et performante pendant toute la durée de vie jusqu'à 50.000 heures.



INFORMATIONS DE COMMANDE

Trousse DELTA 20T avec poignée rechargeable BETA4 NT

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 NT avec chargeur de table NT4**, étui rigide

K-262.24.420

**Trousse DELTA 20T avec poignée rechargeable BETA4 USB**

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 USB avec câble USB et bloc d'alimentation enfichable**, support de poignée, étui rigide,

K-262.28.388 

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 USB**, étui rigide,

K-262.28.387 **Trousse DELTA 20T avec poignée à piles BETA**

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20T, embout de contact avec graduation, **poignée à piles BETA**, étui rigide

K-262.10.118

**Adaptateur Photo SLR**

pour dermatoscope / appareil photo numérique SLR, avec optique.
Grand champ de vision, image nette.

pour Canon K-000.34.185

pour Nikon K-000.34.186



Pour plus d'informations et options de configuration voir: www.heine.com

Sous réserve de modifications techniques.
© 2021 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.

Votre distributeur

08/21. A-000.00.212 f